

Set del Prof. Panetti

Instrumental para cirugías
microscópicas / endoscópicas del oído medio





Instrumental endoscópico/
microscópico del Prof. Panetti

Cirugía endoscópica de oído

El factor limitante de la cirugía endoscópica de oído ha sido, por décadas, el tratarse de una labor que se realizaba con una sola mano. Los cambios constantes entre disector, aspirador y fórceps hacen de esta cirugía un procedimiento lento e incómodo.

En colaboración con el Profesor Giuseppe Panetti, **SPIGGLE & THEIS** ha desarrollado una serie especial de productos que combinan la disección y la aspiración en cada instrumento, lo que permite establecer nuevos estándares en la cirugía endoscópica de oído.





Prof. Giuseppe Panetti
Director del Departamento ORL
Hospital Sao Paolo, Nápoles

“ La función de aspiración permite aspirar y diseccionar con sólo un instrumental, lo que aumenta la eficacia de forma considerable ”


La combinación de aspiración y disección hace que el proceso de trabajo sea más preciso y adecuado. Cada instrumental cuenta con un conducto de aspiración con control en su vástago; a pesar de su reciente desarrollo, las puntas del instrumental corresponden a las formas clásicas y comprobadas que se utilizan en la disección del oído medio. La

función de aspiración permite diseccionar y aspirar simultáneamente, lo que aumenta El empañamiento o manchas en la punta del endoscopio se pueden remover fácilmente con una solución hidrosalina. El empañamiento se reduce considerablemente y las manchas en la punta del endoscopio se pueden retirar fácilmente con una solución hidrosalina.



21 puntas diferentes disponibles

Instrumental con aspiración y disección combinadas para el uso de una sola mano

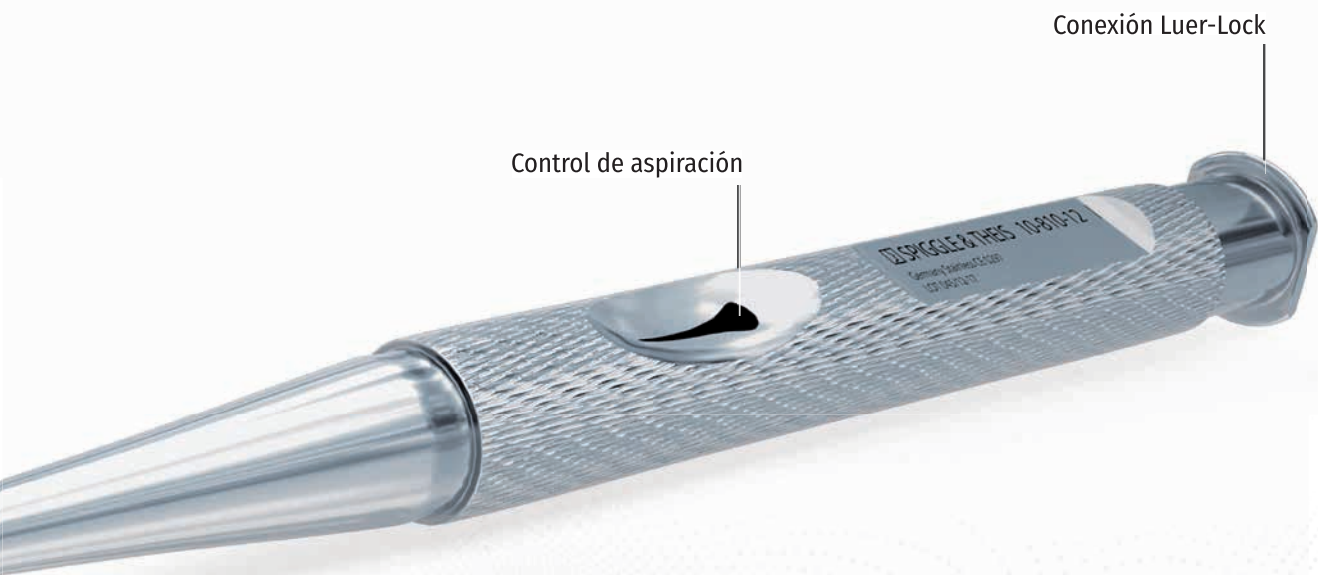

Ventajas del Set de instrumental endoscópico / microscópico de Panetti:

- Facilita la remoción del colesteatoma residual
- Ahorra tiempo
- Menos traumático para el paciente
- Disección y preparación con aspiración simultánea
- Control efectivo de la aspiración
- Autoclavable



Disectores, separadores y micro ganchos con aspiración



10-800-12

Disector timpánico con aspiración, curva única, 3 mm

Art. No.	Dirección
10-800-12	izquierda
10-801-12	derecha



10-801-12



10-802-12

Disector timpánico sinusal con aspiración, curva doble, 6 mm

Art. No.	Dirección
10-802-12	hacia atrás, izquierda
10-803-12	hacia atrás, derecha



10-803-12



10-804-12

Disector para el ático con aspiración, curva doble, 6 mm

Art. No.	Dirección
10-804-12	hacia delante, izquierda
10-805-12	hacia delante, derecha



10-805-12



10-806-12

Micro gancho con aspiración, 45°

Art. No.	Gancho (mm)
10-806-12	1.0
10-867-12	1.5
10-807-12	2.0



10-867-12



10-807-12



10-808-12

Separador con aspiración, 45°

Art. No.	∅ (mm)	Dirección
10-808-12	2.5	aspiración lado interno
10-809-12	2.0	aspiración lado externo
10-811-12	2.5	aspiración lado externo



10-809-12



10-811-12

Disectores, bisturíes, curetas y buscador con aspiración



Bisturí oval con aspiración, 2.5mm



Art. No.	Dirección
10-810-12	apertura lateral, izquierda
10-812-12	apertura lateral, derecha



Disector timpánico con aspiración, curva única, muy fino



Art. No.	Dirección
10-813-12	apertura lateral, izquierda
10-814-12	apertura lateral, derecha



Bisturí de hoz con aspiración, angulado

10-815-12



Cureta con aspiración, angulada

10-816-12



Disector con aspiración, romo



Art. No.	Dirección
10-817-12	curva ascendente a la izquierda
10-818-12	curva ascendente a la derecha



Buscador Preyer con aspiración, romo

10-819-12



Foto 1:1 (13 cm longitud)



Disectores, bisturíes y curetas con aspiración para **cirugía de neurinoma acústico**



Bisturí de hoz con aspiración, angulado
10-830-17



Cureta con aspiración, angulada
10-831-17



Disector con aspiración, curva a la izquierda
10-832-17




Disector con aspiración, curva a la derecha
10-833-17

Características:

- Vástago alargado, 17 cm
- Control de aspiración lateral 90°
- Diseño Panetti, disección y aspiración combinadas
- Conexión Luer-Lock para adaptador de aspiración, 360° giratorio, curva 55°
- Aproximación perfecta al neurinoma acústico y al ángulo pontocerebeloso


Adaptador de aspiración

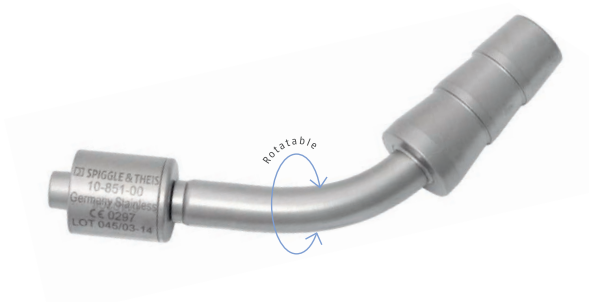

Adaptador de aspiración, giratorio, curva 55°, Luer-Lock macho, con conector para tubo

10-851-00


Otoscopios y cables de luz

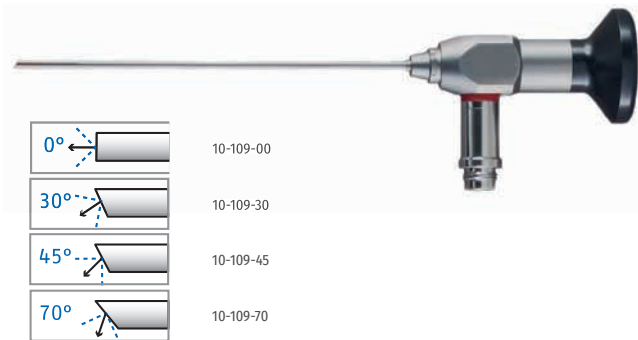

Otoscopio, HD, gran angular, autoclavable, DE 3 mm, 110 mm

Art. No.	
10-109-00	0°
10-109-30	30°
10-109-45	45°
10-109-70	70°

Endoscopio con ópticas opcionales de 0°, 30°, 45° o 70°

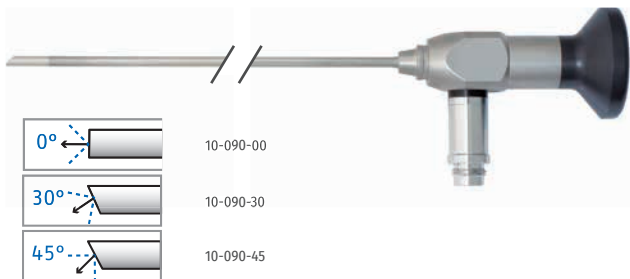

Otoscopio, HD, gran angular, autoclavable, DE 3 mm, 141 mm

Art. No.	
10-090-00	0°
10-090-30	30°
10-090-45	45°

Endoscopio con ópticas opcionales de 0°, 30° o 45°



Cable de fibra óptica de alto rendimiento, 3.5 mm, ángulo 90° lado endoscopio, conexiones Storz/Storz, autoclavable

NUEVO

Art. No.	Largo
70-266-02	1800 mm
70-267-03	3000 mm




Micro fórceps de oído



Micro fórceps de oído, cucharillas ovaladas, recto, extrafino, 0,5 x 1 mm, 8 cm

10-703-04

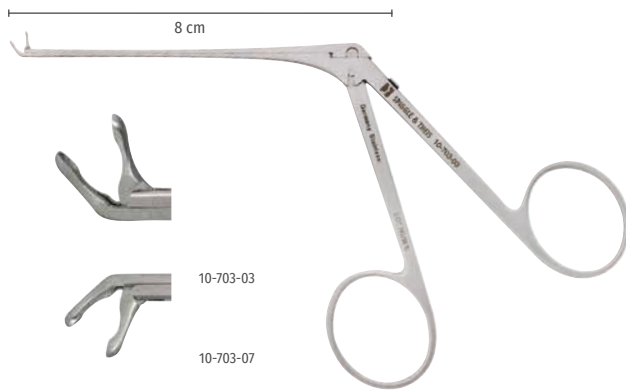

Fórceps para oído Mikro, cucharillas ovaladas, fino, 0,8 x 1,3 mm, 8 cm

Art. No.

Descripción

10-703-03

curva ascendente

10-703-07

curva descendente

Retractor Preyer




Prof. Dr. med. Serena Preyer
Directora ORL en el Hospital Deaconess
Karlsruhe, Germany

“ El retractor atraumático permite intercambiar entre el endoscopio y el microscopio sin ocasionar sangrado en el canal auditivo. ”

La cirugía endoscópica de oído presenta muchas ventajas, pero existen algunos pasos en la operación en los que es conveniente el cambio de endoscopio a microscopio, como, por ejemplo, en la

cirugía de colesteatoma. Gracias a sus dos hojas tachonadas el retractor se puede posicionar de manera estable en el canal auditivo externo sin dañar su delicado tejido.

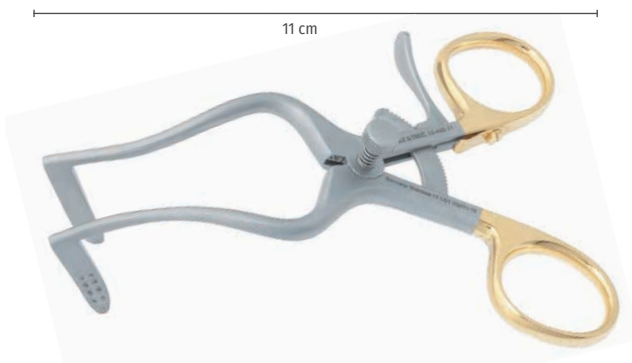


Retractor Preyer
Hojas delgadas tachonadas, mango chapado en oro,
11 cm, desmontable
10-446-11



Retractor Preyer, Black Line
Hojas delgadas tachonadas, mango chapado en oro,
11 cm, desmontable
10-446-11B



Bandejas

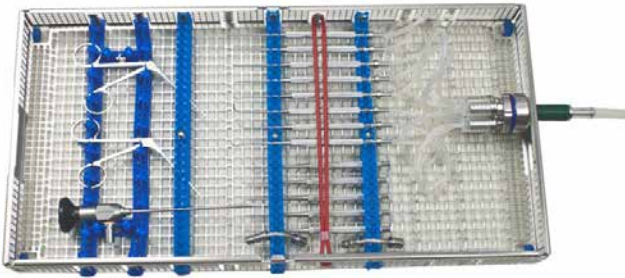

10-840-01 / 10-845-01

Bandeja para set de Panetti

Art. No.

10-840-01

10-841-01

pequeña



Accesorio de irrigación para bandeja, incluye 8 conectores

10-845-01

10-890-00 Set de instrumental endoscópico / microscópico del Prof. Panetti consiste en:

	Art. No.	Descripción	Forma	Dirección	Tamaño	Cantidad
1)	10-800-12	Disector timpánico con aspiración	curva única	izquierda	3 mm	1
2)	10-801-12	Disector timpánico con aspiración	curva única	derecha	3 mm	1
3)	10-802-12	Disector timpánico sinusal con aspiración	curva doble	hacia atrás, izquierda	6 mm	1
4)	10-803-12	Disector timpánico sinusal con aspiración	curva doble	hacia atrás, derecha	6 mm	1
5)	10-804-12	Disector para el ático con aspiración	curva doble	hacia delante, izquierda	6 mm	1
6)	10-805-12	Disector para el ático con aspiración	curva doble	hacia delante, derecha	6 mm	1
7)	10-806-12	Micro gancho con aspiración	45°		1.0 mm	1
8)	10-807-12	Micro gancho con aspiración	45°		2.0 mm	1
9)	10-808-12	Separador con aspiración	45°	aspiración a la izquierda	2.5 mm	1
10)	10-810-12	Bisturí Panetti, ovalado		aspiración a la izquierda		1
11)	10-811-12	Separador con aspiración	45°	aspiración a la derecha		1
12)	10-813-12	Disector con aspiración, muy fino		curva única a la izquierda		1
13)	10-814-12	Disector con aspiración, muy fino		curva única a la derecha		1
14)	10-816-12	Cureta con aspiración Panetti	angulada			1
15)	10-851-00	Adaptador de aspiración, giratorio, curva 55°, Luer-Lock macho, conector de tubo	angulado 55°			2
16)	10-703-03	Micro fórceps de oído, cucharillas ovaladas, delicado, 0.8 x 1.3 mm	curva ascendente		8 cm	1
17)	10-703-04	Micro fórceps de oído, cucharillas ovaladas, muy delicado, 0.5 x 1.0 mm	recto		8 cm	1
18)	10-703-07	Micro fórceps de oído, cucharillas ovaladas, delicado, 0.8 x 1.3 mm	curva descendente		8 cm	1
19)	10-446-11	Retractor Preyer, hojas delgadas tachonadas, mango chapado en oro, 11 cm, desmontable			11 cm	1
20)	10-109-30	Otoscopio, HD, gran imagen, autoclavable, DE 3 mm, 110 mm (ópticas de 0° / 30° / 45° o 70° opcionales)			11 cm	1
21)	10-840-01	Bandeja para set de Panetti				1
22)	10-845-01	Accesorio de irrigación para bandeja				2

10-895-00 Caja de instrumental endoscópico / microscópico del Prof. Panetti consiste en:

Igual a Caja 10-890-00, sin considerar el otoscopio

10-896-00 Caja de instrumental endoscópico / microscópico del Prof. Panetti, consiste en:

	Art. No.	Descripción	Forma	Dirección	Tamaño	Cant.
1)	10-800-12	Disector timpánico con aspiración	curva única	izquierda	3 mm	1
2)	10-801-12	Disector timpánico con aspiración	curva única	derecha	3 mm	1
3)	10-807-12	Micro gancho con aspiración	45°		2.0 mm	1
4)	10-808-12	Separador con aspiración	45°	aspiración a la izquierda	2.5 mm	1
5)	10-812-12	Bisturí ovalado con aspiración		curva única a la derecha	2.5 mm	1
6)	10-815-12	Bisturí de hoz con aspiración	curvo		13 cm	1
7)	10-851-00	Adaptador de aspiración, giratorio, curva 55°, Luer-Lock macho, conector de tubo	angulado 55°			2
8)	10-703-04	Micro fórceps de oído, cucharillas ovaladas, muy fina, 0.5 x 1.0 mm	recto		8 cm	1
10)	10-109-30	Otoscopio, HD, gran angular, autoclavable, DE 3 mm, 110 mm (ópticas de 0° / 30° / 45° o 70° opcionales)			11 cm	1
11)	10-841-01	Bandeja para set de Panetti				1
12)	10-845-01	Accesorio de irrigación para bandeja				1



Representante en
la Argentina de



Burghof 14 · 51491 Overath · Germany
Phone: +49 2206 90 81 - 0
Fax: +49 2206 90 81 - 13
info@spiggle-theis.com
www.spiggle-theis.com

© 2019 by SPIGGLE & THEIS Medizintechnik GmbH
Reservado el derecho a modificaciones y errores - incluyendo imágenes.
Es posible que no todos los productos estén disponibles en su país.